

X線用マイクロ平面撮影台

SA-A2

優れた操作性のフローティング機構。



Sankyo

高精細なX線画像が得られる普及タイプ。

天板のフローティング機能と受像部の左右移動で撮影部位が正確に設定できます。

(天板の長手側±400mm短手側±80mmの両方にスライド、受像部は±200mm移動)


- 天板はスモークアクリルが標準仕様となり、被検者の方にやさしい設計です(透明アクリルも選択可能)。
- 電磁オフロック式を採用。フットスイッチのペダルを踏むと、テーブルの長手方向と短手方向の固定を同時に解除できます。さらに新採用の電磁マグネットにより、操作音の静粛性が向上しました。
- 受像部は、最近のCR化に伴い、固定グリッド(ミクロ)・ブッキー(レシプロ)の両タイプをご用意しています。




X線用ミクロ平面台

SA-A2


オプション

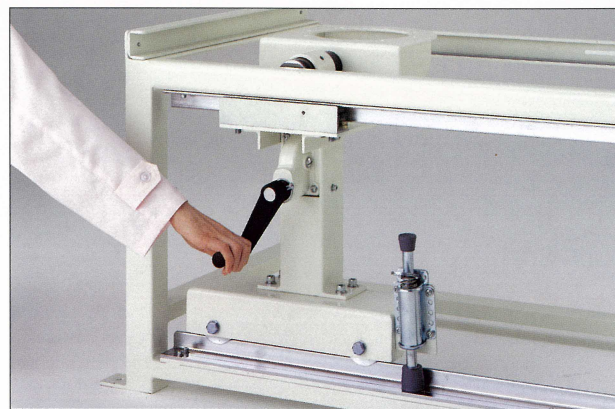


・透視撮影対応のI.I 取付タイプもございます。
・I.Iが上下動するため、鮮明な透視画像を確保できます。

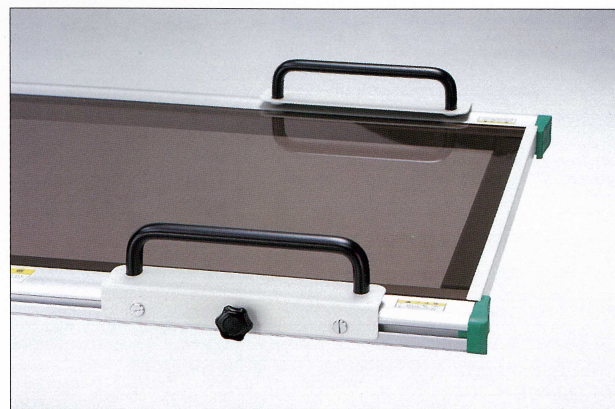

■グリップ

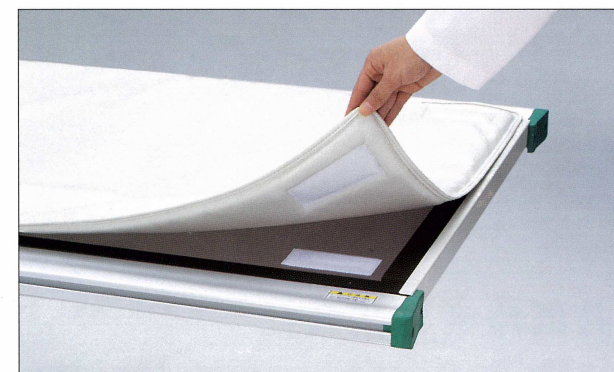

■マット

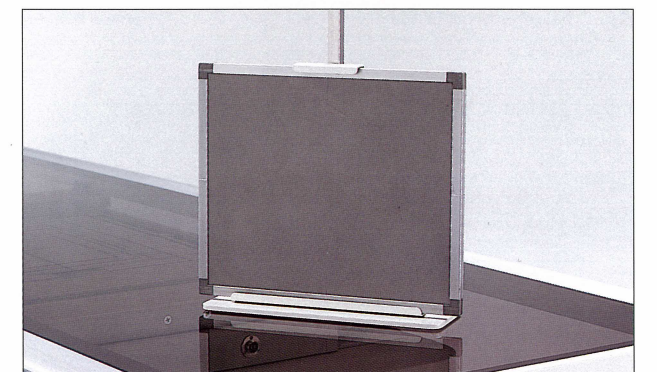

■側面カセットホルダー

●その他オプション

- ・テーブル高さ変更 ・天板長さ変更 ・キャスター付 ・カーボン天板
- ・圧迫帯(マジックバンド式) ・グリッド規格変更

術者の使い勝手を追求。手軽にセットアップし、精細で精度の高いX線画像が得られます。


●主な仕様

	固定グリッドタイプ	ブッキータイプ
外形寸法（幅×奥行×高さmm）	2000×800×600mm	
天板材質	スモークアクリル樹脂（厚10mm）	
天板移動範囲（mm）	長手方向±400mm・短手方向±80mm（手動式）	
天板固定方法	電磁オフロック式	
受像部移動範囲（mm）	テーブル中心 右200mm 左200mm	
グリッド	格子比8:1 集束距離120cm 60本/cm	格子比8:1 集束距離120cm 34本/cm
カセットサイズ	半切縦横以下各サイズ	
天板表面とフィルム間（mm）	約45mm	約65mm
ホトタイマー受光部	各装置メーカー取付可能	
電 源	AC100V 0.1KVA 50/60HZ	
重 量	約120kg	


※オプション 各種メーカーのイメージの取付が可能です。弊社のイメージの取付に関しましては、ハンドル操作によりイメージを被写体に近づけることができます。

医療用具製造業許可番号 27BZ5023

●外形寸法図（単位:mm）

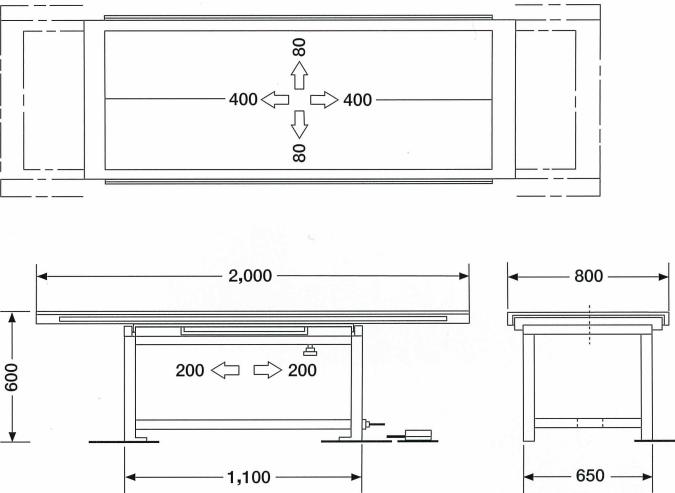

(I.I付図面)

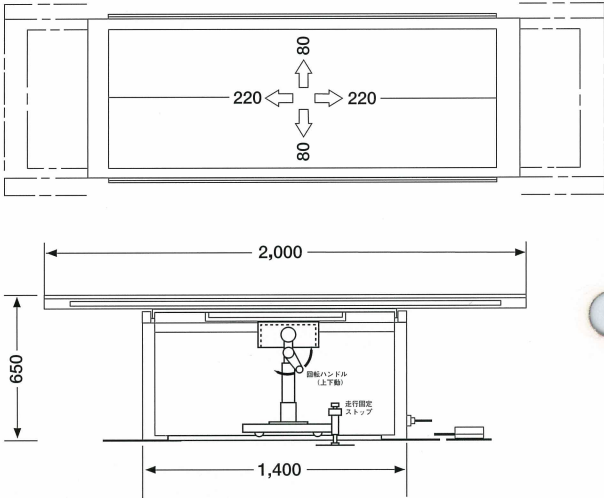

※仕様は改良のために変更する事がありますので、あらかじめお断りいたします。

ご用命は

三共医療機株式会社

□本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納6丁目7番43号
TEL 072-875-3068 FAX 072-875-3069

□東京営業所 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-6-4
TEL 03-5649-9090 FAX 03-3249-2082

□福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号
TEL 092-413-0250 FAX 092-413-9198